




www.dmail.it

D-MEDIA COMMERCE S.P.A.  
VIA ARETINA 25 50065 SIECI (FI) ITALIA  
Tel. +39 055 8363040  
Fax +39 055 8363057  
ASS. TECNICA: TEL. +39 055 4206052  
E-MAIL: assistenza.dmail@dmcl.it

## 207339 - SUPPORTO PER COLLIRIO

Il supporto è stato realizzato per facilitare l'instillazione di gocce di collirio.

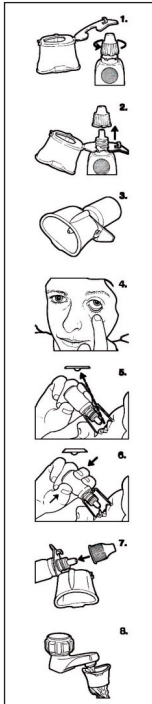

- a. Foro
- b. apertura
- c. clip
- d. bordo

1. Aprire il supporto. Svitare parzialmente il cappuccio del flacone di collirio.
2. Mettere l'apertura del supporto attorno alla base del collo del flacone del collirio. Togliere il cappuccio.
3. Chiudere il supporto senza forzarlo.
4. Abbassare la palpebra inferiore. Mettere il supporto sopra l'occhio appoggiando il bordo sulla guancia.
5. Inclinare la testa all'indietro guardando attraverso il foro del supporto.
6. Premere leggermente il flacone del collirio per far uscire le gocce.
7. Aprire il supporto e richiudere il flacone del collirio.
8. Pulire il supporto lavandolo con acqua tiepida e sapone. Sciacquare ed asciugare.

Potete usare il supporto per tutto il ciclo di terapia. Al termine della terapia pulire bene il supporto prima di riutilizzarlo. Potete usare il supporto con diversi flaconi; si consiglia di usare un supporto per ogni tipo di collirio. Potete sterilizzare il supporto in autoclave a bassa pressione per 30 minuti. Aprire la clip per consentire l'evaporazione dell'umidità. Potete sterilizzare il supporto anche con appositi liquidi, sciacquatelo ed asciugatelo.



www.dmail.pt

D-MAIL VENDA DIRECTA SA  
PARQUE MONSERRATE - PAVILHÃO C  
Z. 1. DA ABRUNHEIRA 2710 SINTRA  
PORTUGAL - Tel. +351 21 915 65 60  
Fax +351 21 915 65 69  
E-MAIL: assistencia@dmail.pt

## APLICADOR DE GOTAS OCULARES

Este aplicador foi desenvolvido para facilitar a aplicação de gotas para os olhos.

- a. Furo
- b. abertura
- c. clipe
- d. rebordo

1. Abra o aplicador. Desaperte a tampa do frasco de gotas, mas não o retire por completo.
2. Coloque a abertura em redor da base do gargalo do frasco, de baixo da rosca. Abra a tampa do frasco.
3. Feche o aplicador. Não force a ponta do frasco dentro do aplicador, pois deve adaptar-se com facilidade.
4. Puxe a pálpebra inferior para baixo. Coloque o aplicador por cima do olho com o rebordo contra a face.
5. Incline a cabeça para trás. Olhe através do furo do aplicador em direcção à luz.
6. Aperte ligeiramente o frasco de modo a que as gotas caiam no olho.
7. Abra o aplicador e reponha a tampa entre cada dose.
8. Para limpar, retire o frasco de gotas para os olhos e lave o aplicador em água quente com sabão. Enxágue bem e deixe secar.

Recomendamos que o aplicador seja usado durante todo o tratamento de uma perturbação ocular. Quando um frasco de gotas para os olhos acabar, retire o aplicador e limpe-o bem antes de colocar outro frasco. Este aplicador pode ser usado em vários tipos de gotas para os olhos ao mesmo tempo, mas se sofrer de várias complicações oculares, recomendamos que use um aplicador para cada tipo de gotas oculares. Nos hospitais e clínicas, o aplicador pode ser esterilizado em autoclave num ciclo de baixa pressão durante 30 minutos. Solte o clipe para permitir que a humidade evapore. O aplicador pode também ser limpo em líquido esterilizador. Enxágue bem e deixe secar.




www.dmail.cz

D-MAIL S.R.O.  
HRANIČNÍ 2253 370 06  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
TEL.: +420 389 139 139  
FAX.: +420 389 139 132  
EMAIL: info@dmail.cz

## 207339 - NÁSTAVEC NA OČNÍ KAPKY

Nástavec byl vyvinut s cílem napomoci při používání očních kapek.

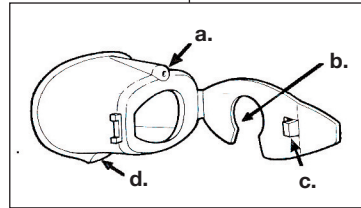

- a. Otvor
- b. Klíčová dírka
- c. Klips
- d. okraj/lem

1. Otevřete nástavec a uvolněte víčko z očních kapek, ale neodstraňujte zcela.
2. Vyhleďte v klíčové dírce otvor a nasadte ho okolo láhve pod hrdlo kapek. Odstraňte uzávěr z láhve kapek.
3. Nezávěrejte nástavec násilím, měl jít snadno zavřít.
4. Podržte spodní víčko.
5. Nakloňte hlavu dozadu. Nastavte si otvor směrem ke světlu.
6. Jemně stlačte lahvičku, aby předepsané kapky mohly kápnout do oka.
7. Otevřete nástavec a nasadte nahoru láhev s očními kapkami a zavřete.
8. Čistěte nástavec po odstranění očních kapek. Mýjte v teplé mýdlové vodě. Řádně opláchněte a pečlivě osušte.

Conosci le altre 1.500 Idee Utili e Introvabili di D-Mail? Se tu non dovessi ancora ricevere il catalogo, puoi richiederlo GRATIS telefonando al: 055-8363040  
**Visita anche il catalogo completo on-line su: [www.dmail.it](http://www.dmail.it)**

Estamos à sua disposição para fornecer todas as informações que necessite através do telefone 21 782 82 00 ou do Fax 21 782 82 09.  
**Visite também o catálogo completo on-line na página Web: [www.dmail.pt](http://www.dmail.pt)**

Chcete se seznámit s dalšími 1500 Užitečnými nápady a pomůckami od D-mailu? Pokud stále nedostáváte katalog, můžete si o něj zažádat ZDARMA telefon: 369.139.139  
**Kompletní katalog on-line na adrese: [www.dmail.cz](http://www.dmail.cz)**